

Defibrylator

# PRIMEDIC HEART SAVE Y

wersja półautomatyczna  
wersja automatyczna



# PRIMEDIC HEARTSAVE Y

**Primedic HeartSave Y to poręczny, lekki, prosty w obsłudze defibrylator AED.**

Przez cały proces ratowania życia poszkodowanego, urządzenie zwraca się bezpośrednio do osoby udzielającej pomocy, motywując do dalszej pracy.

AED uruchamiane jest dzięki podniesieniu pokryw, co powoduje że w każdej chwili jest gotowy do działania. Ma uniwersalne elektrody i wbudowany tryb pediatryczny, dzięki czemu urządzenie jest gotowe do pracy niezależnie od tego w jakim wieku jest osoba poszkodowana. AED ma aż 8 letnią gwarancję i 4 letni czas użytkowania baterii i elektrod, co czyni go jednym z najbardziej ekonomicznych urządzeń na rynku.



KOD PRODUKTU

**HS-Y-10**

Półautomatyczny defibrylator zewnętrzny (HeartSave Y)

KOD PRODUKTU

**HS-YA-10**

W pełni automatyczny defibrylator zewnętrzny (HeartSave YA)

**8**

lat gwarancji



adaptacyjne dostosowanie głośności do otoczenia

**4**

lat gwarancji na baterię



metronom RKO

**4**

lat gwarancji na elektrody

**4**

języki komunikatów. Możliwość zmiany języka



wbudowany tryb pediatryczny

**24/7**  
✓

codzienne autotesty

# UNIKALNE CECHY

- Defibrylator w trybie półautomatycznym lub automatycznym
- Automatyczne włączenie defibrylatora AED po otwarciu pokrywy
- Primedic Heart Save Y posiada wbudowany moduł pediatryczny
- Bardzo proste, wyraźne komunikaty głosowe
- Łatwe sterowanie AED tylko jednym przyciskiem
- Odporny na wodę i kurz - IP55
- Odporny na upadek z 1m
- Możliwa defibrylacja na mokrej i metalowej nawierzchni
- 7 sekund przerwy RKO
- Protokół energetyczny aż do 360J
- Adaptacyjna głośność komunikatów - automatyczne dostosowanie głośności do otaczających dźwięków
- Metronom wspomagający użytkownika dźwiękowym sygnałem prawidłowej częstości uciśnień klatki piersiowej
- Możliwość zmiany języków przez użytkownika za pomocą jednego przycisku - język polski i angielski
- Wstępnie podłączone elektrody dla jak najszybszej opieki nad poszkodowanym
- AED Primedic posiada system autokontroli, codzienne autotesty
- Poziom baterii i stanu technicznego AED widoczny na zewnętrznym wyświetlaczu
- Zapis danych i głosu do 24h na karcie pamięci
- Wyposażony w 4 letnią baterię gwarantuje niezawodność i mobilność
- Elektrody posiadają 4 lata żywotności



## wymiary

wymiary: 29,5 (z rączką) x 21,5 x 9,5 cm  
waga z baterią: około 2.5kg



## zestaw zawiera

defibrylator PRIMEDIC HeartSave Y  
bateria 4 letnia  
komplet elektrod uniwersalnych  
karta pamięci  
zintegrowana miniapteczka  
instrukcja obsługi w jęz. polskim





# WSPARCIE

## 8 lat gwarancji


Udzielamy 8 letniej gwarancji producenta. W tym czasie gwarantujemy bezpłatny serwis gwarancyjny.

## 4 lata gwarancji na baterie i elektrody

Wyjątkowa na rynku długość przydatności elektrod.

## Zgodność EU MDR

Zgodność z najnowszymi wymogami dla wyrobów medycznych.

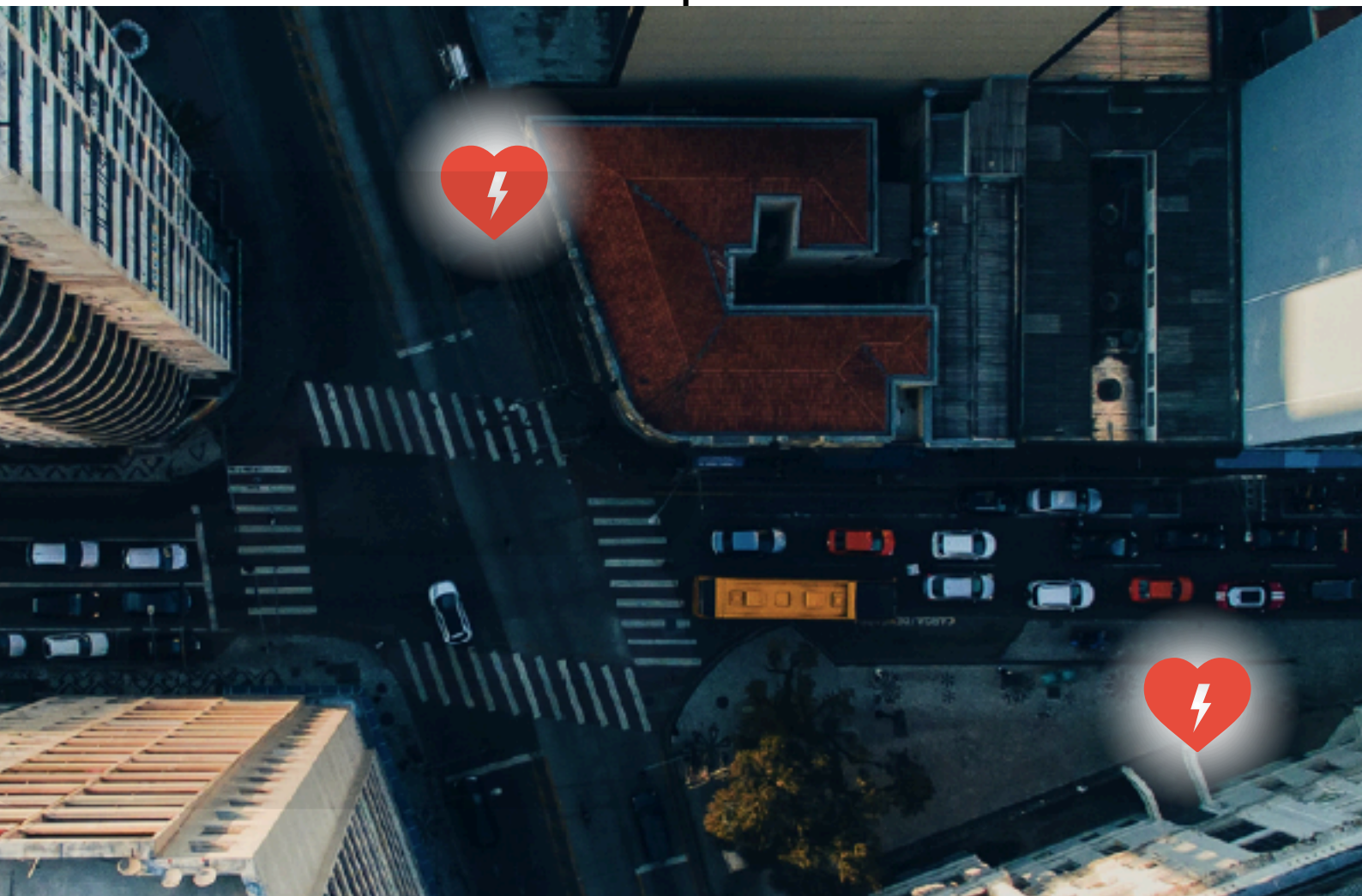

Parametry techniczne HeartSave Y / YA

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne                                | Defibrylator AED z funkcją analizy rytmu serca.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tryb pracy                                       | Y - Półautomatyczny , YA - w pełni zautomatyzowany                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wygląd                                           | Otwarcie poprzez podniesienie klapki, natychmiastowy dostęp do uniwersalnych elektrod. Przycisk defibrylacji w wersji Y. Dodatkowo przycisk zmiany języka i przycisk pediatryczny.                                                                                                    |
| Wymiary zewnętrzne                               | długość 29,5cm (z rączką), szerokość 21,5cm, wysokość 9,5 cm                                                                                                                                                                                                                          |
| Waga                                             | waga z baterią: około 2.5 kg                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gotowość do pracy                                | Informacja OK - gotowy do pracy, sprawny. X - wymagana uwaga                                                                                                                                                                                                                          |
| Bateria i elektrody: wyładowanie/ umiejscowienie | Domyślna sekwencja energii dla dorosłych: Poziom 1: 200 J, Poziom 2: 300 J, Poziom 3: 360 J Domyślna sekwencja energii dla dzieci: Poziom 1: 50 J Poziom 2: 70 J Poziom 3: 100 J Konfiguracja energii dla ostatniego poziomu musi być większa równa energii dla poprzedniego poziomu. |
| Tryb pediatryczny                                | Wbudowany tryb pediatryczny, uruchamiany przyciskiem. Elektrody oznaczone rysunkami.                                                                                                                                                                                                  |
| Wypożażenie                                      | Zestaw ratunkowy umiejscowiony w tylnej części obudowy. 1x nożyczki<br>1x jednorazowa maszynka do golenia, 1x rękawiczki jednorazowe, 1x chusteczka do resuscytacji                                                                                                                   |
| Metoda analizy pacjenta                          | Dwufazowa obcięta fala wykładnicza, z autokompensacją w oparciu o impedancję pacjenta.                                                                                                                                                                                                |
| Pomiar impedancji                                | 25~300Ω                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Czułość/dodładność                               | Ocena EKG pacjenta, jakości sygnału, właściwego podłączenia elektrod oraz impedancji pacjenta, celem określenia czy konieczna jest defibrylacja.                                                                                                                                      |
| Temperatura przechowywania                       | Od 0°C do 50°C, krótkotrwale -30°C do +70°C                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura pracy                                | Od -10°C do 55°C                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wilgotność względna                              | Od 5% do 95% (bez kondensacji)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Normy                                            | IEC 60529/EN 60529                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wodoodporność                                    | IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wysokość                                         | 0 – 4575 metrów                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wibracje                                         | MIL STD 810F metoda 516.5                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wstrząsy                                         | MIL STD 810F metoda 514.5+                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Odp. na zakłócenia radioelektryczne              | EN61000-4-3 80MHZ -2,5GHZ (10 V/m)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wysokość upadku                                  | 1 metr                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Czas ładowania i pojemność baterii               | Zazwyczaj 150J poniżej 7 sekund, 200J poniżej 12 sekund.                                                                                                                                                                                                                              |
| Typ zapisu zdarzeń                               | Fala EKG 10 godzin, zdarzenia: 2000 wydarzeń, rejestr audio: 2 godziny, raport testu samosprawdzającego: 3650 raportów                                                                                                                                                                |
| Długość przewodów                                | 1 metr                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Metronom                                         | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Język komunikatów                                | Polski, Angielski, Niemiecki, Rumuński                                                                                                                                                                                                                                                |



**Producent:**

Metrax GmbH  
Rheinwaldstraße 22  
78628 Rottweil  
Niemcy  
Tel.: +49 741 257 0  
E-Mail:  
[info@primedic.com](mailto:info@primedic.com)  
[www.primedic.com](http://www.primedic.com)  
Nr rej. WEEE: 73450404

Yuwell Medical  
Equipment & Supply Co.,  
Ltd

