



Laerdal

helping save lives

Laerdal Pocket Mask

Maska kieszonkowa Laerdal Pocket Mask™ została zaprojektowana do bezpiecznego prowadzenia oddechu zastępczego zarówno u osób dorosłych, dzieci, jak i niemowląt. Łączy w sobie funkcje zastawki jednokierunkowej o niskim oporze przepływu z wysokiej jakości hydrofobowym filtrem bakteryjnym 3M™ oferując osobom prowadzącym przy jej pomocy sztuczną wentylację maksymalnie skuteczną ochronę i wysoki komfort pracy.




Właściwości masek Laerdal Pocket Mask™:

- mankiet wypełniony powietrzem dający bardzo dobrą szczelność maski
- wersje z wejściem na tlen umożliwiające podanie dodatkowego tlenu zarówno pacjentom oddychającym spontanicznie jak i wymagającym sztucznego prowadzenia wentylacji
- hydrofobowy filtr bakteryjny 3M Filtrete™ gwarantujący wysokie bezpieczeństwo użycia - dzięki właściwościom elektrostatycznym blokuje on niebezpieczne aerozole – nośniki bakterii i wirusów, zatrzymuje ponad 98% cząstek o wielkości powyżej 3,6 µm jednocześnie wytrzymując temperatury do 80°C i charakteryzując się niezwykle niskimi oporami przepływu powietrza
- optymalna odległość od pacjenta w trakcie wentylacji pozwalająca ratującemu wzrokowo ocenić ruchy jego klatki piersiowej
- umieszczenie filtra przed zastawką kierunkową dodatkowo zmniejszające prawdopodobieństwo zakażenia krzyżowego
- kształt zastawki jednokierunkowej wyprowadzający powietrze wydychane przez pacjenta z dala od twarzy ratownika
- standardowo załączone rękawice ochronne (bez lateksu) i mokra chusteczka dezynfekująca dla większej wygody i bezpieczeństwa użycia zestawu
- wielokrotność użycia maski - poza jednorazowymi i wymiennymi: filtrem bakteryjnym i zastawką jednokierunkową
- proste i szybkie przygotowanie maski do użycia



Zasada działania zastawki kierunkowej

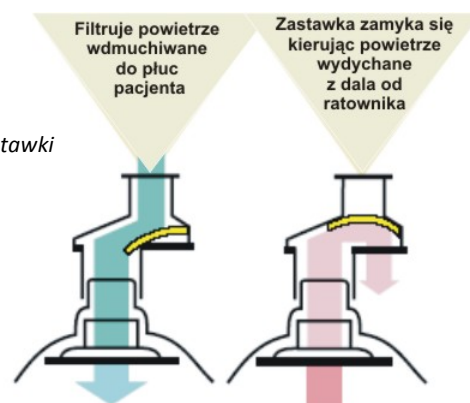

Dziecięca maska kieszonkowa **Laerdal Paediatric Pocket Mask™** została zaprojektowana by sprostać odmiennym warunkom anatomicznym małych pacjentów podczas ich sztucznej wentylacji przy zachowaniu wysokiego bezpieczeństwa ratownika. Wykorzystując tę samą zastawkę jednokierunkową o niskim oporze przepływu co tradycyjna Laerdal Pocket Mask™ w kombinacji z miękką, przezroczystą silikonową maską jest ona nieodzownym narzędziem dla wszystkich ratowników mających do czynienia z dziećmi i niemowlętami.



Dostępne warianty masek Laerdal Pocket Mask:

Maski standardowe dla dorosłych:

- 82 00 11 Laerdal Pocket Mask w/Gloves & Wipe in Yellow Hard Case – maska z rękawiczkami oraz chusteczką dezynfekującą w żółtym, twardym pudełku
- 82 00 40 Laerdal Pocket Mask w/Gloves & Wipe in Blue Soft Pack - maska z rękawiczkami oraz chusteczką dezynfekującą w niebiesko-żółtym etui z przypięciem do paska
- 82 00 41 Laerdal Pocket Mask w/Gloves & Wipe in Black Soft Pack - maska z rękawiczkami oraz chusteczką dezynfekującą w czarno-żółtym etui z przypięciem do paska
- 82 00 42 Laerdal Pocket Mask w/Gloves & Wipe in Camouflage Soft Pack - maska z rękawiczkami oraz chusteczką dezynfekującą w etui w kolorze wojskowym z przypięciem do paska

Maski dla dorosłych z wejściem na tlen:

- 83 00 11 Laerdal Pocket Mask w/Oxygen Inlet & Head Strap w/Gloves & Wipe in Yellow Hard Case – maska z rękawiczkami oraz chusteczką dezynfekującą w żółtym, twardym pudełku
- 83 00 40 Laerdal Pocket Mask w/Oxygen Inlet & Head Strap w/Gloves & Wipe in Blue Soft Pack - maska z rękawiczkami oraz chusteczką dezynfekującą w niebiesko-żółtym etui z przypięciem do paska
- 83 00 41 Laerdal Pocket Mask w/Oxygen Inlet & Head Strap w/Gloves & Wipe in Black Soft Pack - maska z rękawiczkami oraz chusteczką dezynfekującą w czarno-żółtym etui z przypięciem do paska

Maski pediatryczne:

- 82 00 50 Laerdal Paediatric Pocket Mask w/Gloves & Wipe in Blue/Yellow Soft Pack - maska z rękawiczkami oraz chusteczką dezynfekującą w niebiesko-żółtym etui z przypięciem do paska
- 82 00 51 Laerdal Paediatric Pocket Mask w/Gloves in Blue/Yellow Soft Pack - maska z rękawiczkami w niebiesko-żółtym etui z przypięciem do paska
- 82 00 52 Laerdal Paediatric Pocket Mask w/Gloves & Wipe in Blue/Yellow Soft Pack - maska z rękawiczkami w czerwono-czarnym etui z przypięciem do paska

Maski kieszonkowe Laerdal Pocket Mask są również dostępne w wersji z własnym logo.



Materiały zużywalne:

- 82 06 10 Filter - filtr bakteryjny
- 82 04 10 One-Way-Valve – zastawka jednokierunkowa
- 82 07 00 Update Pack - komplet: filtr bakteryjny i zastawka jednokierunkowa
- 83 01 10 Head Strap Adjustable - regulowany pasek do mocowania maski na głowie (10 szt.)

Laerdal Medical Poland Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 6
40-241 Katowice
tel. 32 493 70 20
fax 32 493 70 22
imp@laerdal.pl

Oddział Białystok
tel. 85 874 21 52
bialystok@laerdal.pl

Oddział Poznań
tel. 61 899 82 01
poznan@laerdal.pl

Region Gdańsk
tel. 601 29 09 17
gdansk@laerdal.pl

Region Warszawa
tel. 721 32 78 80
warszawa@laerdal.pl

Region Wrocław
tel. 601 21 83 01
wroclaw@laerdal.pl

www.laerdal.pl